

חדש

1-DAY ACUVUE® MOIST Brand MULTIFOCAL  
עדשת המגע החדשה למטופלים עם עיניים עם פרסביופיה

# מדריך להתאמה מוצלחת

## 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL

עוזרת לך להמשיך לתת מענה לצורכי הראיה  
של המטופלים שלך גם כשהם מתבגרים



המוצר הזוכה לשנת 2015 כמוצר החדשני ביותר בקטגוריית עדשות המגע

 EYE-INSPIRED™ DESIGN

# ג'ונסון & ג'ונסון ויז'ן קר קידמה את טכנולוגיית עדשות המגע המולטיפוקליות, על מנת שתוכלו לתת מענה לצורכי המטופלים שלכם כשהם מתבגרים

## עיצוב בהשראת העין – EYE-INSPIRED™ DESIGN

1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL עוצבה באופן ספציפי להתאים לצורה הטבעית ולאופן התפקוד של העין המתבגרת וזאת במטרה לעזור לך להמשיך ולספק למטופלים שלך חווית ראייה מצויינת.\*1

### 1. אופטימיזציה של האישון - טכנולוגיית INTUISIGHT™

- 183 עיצובים אופטיים בעלי גודל ייחודי התואמים את גודל האישון הפרסביופי המשתנה לאורך טווח התיקון הרפרקטיבי<sup>1</sup>

### 2. מרכז מדויק


- הקימור האחורי של העדשה שמשלב בין עיצוב ספרי וא-ספרי מבטיח מרכז אופטימלי<sup>1</sup>
- המרכז הא-ספרי תואם באופן טבעי את הקרנית<sup>1</sup>
- הפריפריה הספרית מאפשרת למרכז להיות תואם לאופטיקה<sup>1</sup>

העיצוב האופטי בגודל הנכון, במקום הנכון בעין<sup>1</sup>

### 3. עשויה מחומר הגלם של 1-DAY ACUVUE® MOIST

- "ריפוד" של לחות לאורך זמן עוזר להקטין סימפטומים של יובש למרכיבי עדשות מגע עם עיניים מתבגרות<sup>1</sup>

נוחות שנמשכת לאורך היום ובסוף היום<sup>1</sup>

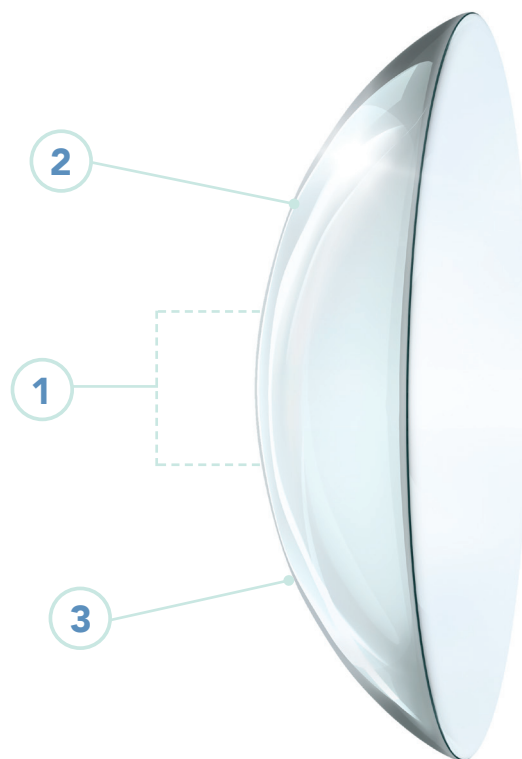

כשנעשה שימוש במדריך  
התאמה זה, 94% מהנבדקים  
הותאמו בהצלחה עם  
לא יותר מ-2 זוגות\*

## מדריך למציאת העדשה המתאימה ביותר לעין המתבגרת

### הכנת המטופל:

1. התחל תמיד עם רפרקציה סובייקטיבית חדשה, תן את הפלוס המקסימלי למרחק וקבע את ה-spherical equivalent (best sphere). יישם תיקון vertex distance אם הוא גדול מ-4.00D±. וודא שהאסטיגמציה קטנה מ-1.00DC.
2. קבע את העין הדומיננטית.  
• מומלץ במבחן טשטוש של +1.00D.
3. קבע את ה-ADD המינימלי שמבוסס על צרכי המטופל.  
• התמקד בצורכי המטופל לקריאה (מחשב, טאבלט, סלולר וכדומה).
4. פנה ל**טבלת ההתאמה** לבחירת ה-ADD הרצוי על מנת לקבוע מרשם עבור עדשות ההתנסות.  
• אפשר למטופל לבלות 10 דקות מחוץ לחדר הבדיקה "בעולם האמיתי" לפני שתבדוק את ביצועי הראיה.
5. אם למטופל שלך עדיין יש צרכים ספציפיים לקרוב או לרחוק, פנה ל"**טבלת שיפורי ההתאמה**".

על מנת לבצע התאמה נכונה כבר בעדשה הראשונה,  
עקוב אחרי טבלת ההתאמה הבאה:

טבלת שיפורי התאמה - למטופלים המבקשים חידוד ראייה לרחוק או לקרוב	
שיפור ראייה לקרוב	שיפור ראייה לרחוק
LOW	1-DAY ACUVUE® MOIST עדשה ספרית
LOW +0.25D	LOW
MID	LOW
MID +0.25D	MID
MID	MID
HIGH +0.25D	MID +0.25D



אפשר  
למטופל  
לבלות  
10 דקות  
מחוץ לחדר  
הבדיקה  
"בעולם  
האמיתי"  
לפני  
שתעבור  
לבדיקת  
ביצועי  
הראיה.

למציאת האיזון הטוב ביותר בין ראייה לרחוק ולקרוב		
בחירת עדשה	עין	עוצמה ADD
LOW	עין דומיננטית	+0.750D עד +1.25D
LOW	עין לא דומיננטית	
MID	עין דומיננטית	+1.50D עד +1.75D
MID	עין לא דומיננטית	
MID	עין דומיננטית	+2.00D עד +2.50D
HIGH	עין לא דומיננטית	

## 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL

### פרטי העדשה

עיצוב מרכז א-ספרי קרוב עם טכנולוגיית INTUISIGHT™	עיצוב
etafilcon A	חומר הגלם
14.3 מ"מ	קוטר
8.4 מ"מ	קימור בסיס
PVP המוטמע בחומר הגלם באמצעות טכנולוגיית LACREON®	גורם הרטבה
דרגה 2, UVB 99% ו-UVA 86%	חסימת UV*
58%	תכולת מים
21.4	<sup>†</sup> Dk
25.5	<sup>†</sup> Dk/t
0.084 מ"מ ב-3.00D (משתנה לפי העוצמה)	עובי מרכז העדשה
כן	גוון נראות
כן, 1-2-3	סימון פנים-חוץ
0.25D עד +6.00D במרווחים של 0.25D	טווח הפרמטרים
+1.25D עד +0.75D LOW +1.75D עד +1.50D MID +2.50D עד +2.00D HIGH	עוצמה ADD

1. נתונים מקובץ 2015 JJVC date on file

\* כל עדשות המגע ממותג ACUVUE® הינן בעלות חסימת UV מדרגה 1 או 2 ועוזרות לתת הגנה מפני מעבר של קרינת UV מזיקה אל הקרנית ופנים העין. עדשות מגע חוסמות UV אינן מהוות תחליף למשקפיים חוסמי UV כגון: משקפי מגן או משקפי שמש חוסמי UV, מאחר והן אינן מכסות לחלוטין את העין והאזור סביב לה. חדירת קרני UV נמדדת דרך עדשה -1.00D.

† DK units:  $\times 10^{-11}$  (cm<sup>2</sup>/sec) (ml O<sub>2</sub>/ml x mm Hg). Dk/t units: 10<sup>-9</sup> (cm/sec) (ml O<sub>2</sub>/ml x mm Hg). All Dk values: Fatt units at 35°C, determined via polarographic method (boundary & edge corrected).

ACUVUE®, 1-DAY ACUVUE® MOIST, EYE-INSPIRED™, LACREON®, INTUISIGHT™ הינם שמות מסחריים רשומים של ג'יי סי הלתי קר בע"מ. © ג'יי סי הלתי קר בע"מ 2016.